

「ほのぼの」シリーズ
介護保険対応版 ほのぼのNEXT
システム担当者 様

NDソフトウェア株式会社
システム開発本部 開発第1部 部長 五十嵐 悠太

お詫び LIFE連携画面で一部集計項目の集計結果が不正になる 場合があります

拝啓 平素より「ほのぼの」シリーズをご愛顧いただきまして厚く御礼申し上げます。

早速ではございますが、ほのぼのNEXT2024年7月改正対応版におきまして、以下の不具合が発生することが判明いたしました。この度の不具合により、大変ご迷惑をお掛けしますこととお詫び申し上げます。不具合の内容および今後の対応につきまして下記のとおりご案内申し上げます。大変お手数をお掛けし申し訳ございませんが、ご対応の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

今後とも品質において一層の向上に努めて参ります。

敬具

記

【対象の事業種別】

LIFE連携において「科学的介護に関する評価」および「自立支援促進に関する評価・支援計画書」を集計するお客様

※通所介護、通所リハビリテーション（予防も含む）、特定施設入居者生活介護（予防も含む）、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護（予防も含む）、小規模多機能型居宅介護（予防も含む）、認知症対応型共同生活介護（予防も含む）、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、総合事業（通所型）

【発生条件と不具合の内容】

「科学的介護に関する評価」と「自立支援促進に関する評価・支援計画書」で不具合の発生条件および不具合の内容が異なります。以下の内容をご確認いただき、ご対応をお願いいたします。

■科学的介護に関する評価

【発生条件】

[LIFE] → [科学的介護加算] 画面で以下のいずれかの項目が未登録の利用者が存在する場合に発生いたします。

- ・ 要介護度
- ・ 日常生活自立度（障害高齢者）
- ・ 日常生活自立度（認知症高齢者）

科学的介護推進情報	診断名・服薬情報	DBD13	ICFステージング
要介護度	要介護2		LIFE
日常生活自立度	障害高齢者 認知症高齢者	I	
評価時点	<input type="checkbox"/> サービス利用開始時 <input checked="" type="checkbox"/> サービス利用中 <input type="checkbox"/> サービス利用終了時		

[要介護度]、[日常生活自立度（障害高齢者）]、
[日常生活自立度（認知症高齢者）]のいずれ
かが未登録の場合に障害が発生します。

【不具合の内容】

[LIFE] → [LIFE 連携] 画面で「科学的介護推進に関する評価」を選択して集計した際に、「科学的介護推進に関する評価（診断名）」（以下、診断名情報という）および「科学的介護推進に関する評価（服薬情報）」（以下、服薬情報という）の集計結果が以下のいずれかとなります。

- ① 診断名情報および服薬情報が1件も集計されません。
- ② 発生条件を満たす利用者について、「科学的介護推進に関する評価」が集計されていないのにも関わらず、診断名情報および服薬情報が集計されます。

■ 自立支援促進に関する評価・支援計画書

【発生条件】

[LIFE] → [自立支援促進加算] 画面で [要介護度] が未登録の場合に発生いたします。

基本情報・診断名	現状の評価	支援実績・計画	ICFステージング
医師 ほのぼの 花子			
介護支援専門員 ほのぼの 太郎			
要介護度		日常生活自立度	障害高齢者
		U 1	認知症高齢者
			I

【不具合の内容】

[LIFE] → [LIFE 連携] 画面で「自立支援促進に関する評価・支援計画書」を選択して集計した際に、発生条件を満たす利用者について、「自立支援促進に関する評価・支援計画書」が集計されていないのにも関わらず、「自立支援促進に関する評価・支援計画書（診断名）」のみが集計されます。

【LIFE データ集計・提出について】

[LIFE] → [科学的介護加算] 画面および [LIFE] → [自立支援促進加算] 画面で [要介護度]、[日常生活自立度（障害高齢者）]、[日常生活自立度（認知症高齢者）] をすべて登録した上で、[LIFE] → [LIFE 連携] 画面で集計を行ってください。


これらの項目は LIFE システム提出の際に必須となりますので、修正プログラム適用後においても各画面で登録をした上で、集計を行っていただきますようお願いいたします。

【修正プログラムのご提供について】

- ・ NDS ダウンローダーをご利用のお客様（Ver. 3.01.0094 のお客様）
NDS ダウンローダー：2024年8月5日（月）午後6時に配信を予定しております。
- ・ オンラインプラットフォームをご利用のお客様
最新バージョン（Ver. 3.01.0094）に対する修正プログラムを下記メンテナンスにて適用いたします。
メンテナンス実施：2024年8月6日（火）午前0時～午前4時までを予定しております。

【修正プログラム適用後の操作方法】

- 1) [メニュー] → [ヘルプ(H)] → [バージョン情報(A)…] より、BLD 番号が【20240805.0000 以降】に更新されたことをご確認ください。

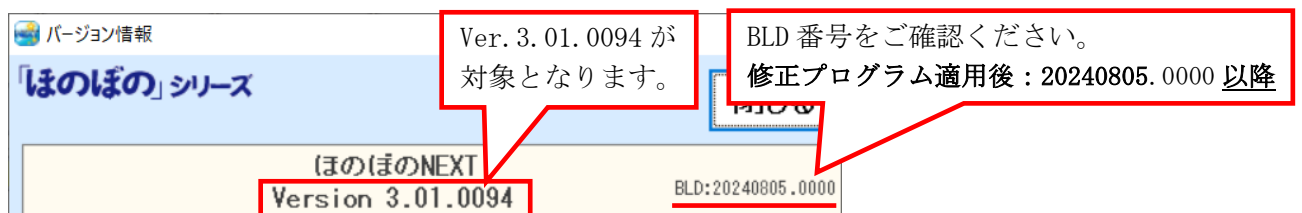

※NDS ダウンローダーのお客様で、修正プログラムが適用されていない（BLD 番号が 20240805.0000 より前の番号）場合は、NDS ダウンローダーより修正プログラムをダウンロードし、実行してください。

- ・ 修正プログラム：「リリース ID：2024年8月5日版」

- 2) 修正プログラムの適用が確認できましたら（BLD 番号が 20240805.0000 以降の場合）、[LIFE] → [LIFE 連携] 画面で集計を行ってください。

- NDS ダウンローダーがない、かつ、オンラインプラットフォーム以外のお客様（Ver3.01.0094 のお客様）
2024年10月版のバージョンアップにて対応を予定しております。

【お問い合わせ先】

ご不明な点がございましたら、「ほのぼの」シリーズサポートセンターまでお問い合わせください。

以上